



# Aide-mémoire

## Pansement Triad<sup>MD</sup>



Source : photos autorisées par Coloplast

### Définition :

C'est un pansement hydrophile stérile à base d'oxyde de zinc sous forme de pâte conçu pour prendre en charge des quantités d'exsudat de léger à modéré, pour maintenir la plaie recouverte tout en favorisant un milieu de cicatrisation humide.

### Indications :

- Lésions de pression de stade 2 et 3
- Plaies superficielles avec exsudat de léger à modéré
- Plaies superficielles dans des zones difficiles et/ou avec des surfaces irrégulières (pli inter fessier, région péri-anale, région périnéale, aine, etc.)
- Lésions avec bris cutanées reliées à l'incontinence



Photos ICM, 2024



Zones difficiles / irrégulières  
Source : photos autorisées par Coloplast



Lésions cutanées reliées à incontinence  
Source : photos autorisées par Coloplast

### Contre-indications :


- Lésion de pression de stade 1
- Plaies infectées
- Brulures du 3<sup>e</sup> degré
- Dermites fongiques
- Lésions sans bris cutanées

Évaluation faite par l'infirmière à compléter sur la feuille Soins infirmiers – Feuille de suivi de plaies avant de débiter l'application du pansement hydrophile Triad<sup>MD</sup>

**\*\*\* Seules les infirmières/infirmiers peuvent appliquer le pansement hydrophile Triad<sup>MD</sup> 1 fois/jour + PRN \*\*\***

## Mode d'emploi :

- 1- Nettoyer la plaie : avec eau + savon ou solution NaCl 0.9%.
- 2- Appliquer le pansement de pâte hydrophile Triad<sup>MD</sup> dans le lit de la plaie avec une épaisseur de 2-3mm. à l'aide d'un abaisse langue stérile/coton-tige stérile ou avec des gants stériles.
- 3- Appliquer jusqu'à 1-2 cm au pourtour de la plaie.
- 4- Appliquer un pansement secondaire (type pansement mousse bordée) si nécessaire en fonction de l'exsudat et du site de la plaie.
- 5- Enlever les résidus souillés SANS frotter à l'aide d'eau et savon ou avec le nettoyeur sans rinçage ou compresse imbibée de Nacl 0.9%. Les résidus sans souillures ne doivent pas être enlevés absolument à chaque application. Il est normal que le lit de la plaie demeure blanchâtre.
- 6- Enlever complètement tous les résidus de la pâte hydrophile Triad<sup>MD</sup> maximum aux 7 jours.

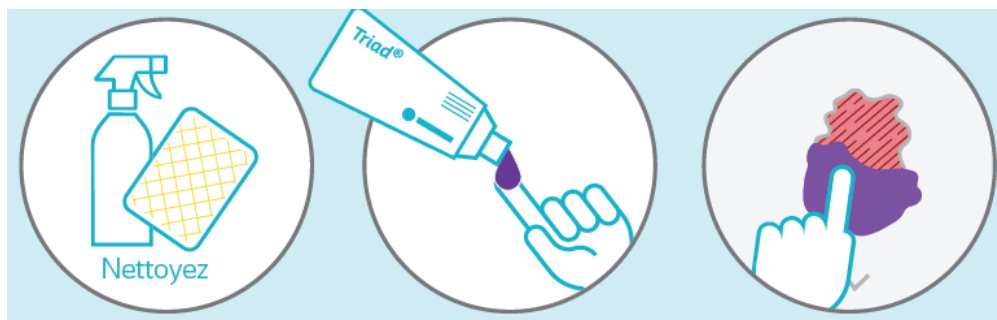

Source : photos autorisées par Coloplast



Source : photos autorisées par Coloplast

## Consultation auprès de la conseillère en soins infirmiers volet soins des plaies et de la peau SI et SEULEMENT si :

- La lésion de pression ne s'améliore pas ou s'aggrave après 7-10 jours.
- La plaie présente des signes d'infection.

Révisé DSI : Fabienne De Witte, Conseillère soins de la peau et gestion des plaies, octobre 2024

Approuvé DSI-secteur conseil : 2024-10-25